



therapy

beurer

SL 70 Schnarchstopper

Sanfte Schnarchtherapie zur Reduktion von Schnarchen für eine erholsame Nacht

Innovative Echtzeit-Erkennung von Schnarchen mittels Erfassung von Schnarchgeräuschen und Körperschall

Einfache Fixierung am Ohr, kaum sichtbar

Sofortige Behebung von Schnarchgeräuschen durch Ton- und Vibrationsalarm am Ohr durch Festigung der Halsmuskulatur und gegebenenfalls Veränderung der Liegeposition

Impulsintensität einstellbar

Mit gratis App „beurer SleepQuiet“ für:

- präzise Schnarchanalyse
- Anzeige und grafische Darstellung der Daten (Tag/Woche/Jahr)
- Ermittlung der maximalen Schnarchlautstärke
- Schnarchtagebuch

Kompatibel ab iOS 8.0 und Android 4.4, Bluetooth® 4.0

Praktischer Akku-Betrieb

Inkl. 3 verschiedener Ohrstöpselgrößen

Inkl. Ladekabel und Adapter

Produktmaße (LxBxH): 50 x 10 x 60 mm

Produktgewicht: ca. 13,3 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 67755 8

Art-Nr.: 677.55

SL 70 Snore Stopper

Gentle snore therapy to reduce snoring for a good night sleep

Innovative real-time detection of snoring as it extracts the user's snoring voice and bone conduction vibration signal

Easy fixation on the ear, barely visible

Immediate termination of snoring via sound and vibration alarm at the ear. The throat muscles become firm and it may change the lying position.

Adjustable pulse intensity

With free app „beurer SleepQuiet“ for:

- Precise snoring analysis
- Display and graphical representation of data (day/week/year)
- Determination of snoring volume
- Snore diary

Compatible with iOS 8.0 and Android 4.4 and above, Bluetooth® 4.0

Practical rechargeable battery

Incl. 3 different earplug sizes

Incl. charging cable and adapter

Product measurements (LxWxH): 50 x 10 x 60 mm

Product weight: approx. 13.3 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 6 x 4


EAN no.: 4211125 67755 8

Item no.: 677.55



therapy

beurer

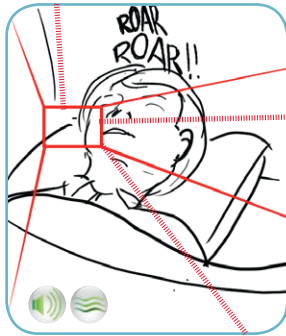

Der innovative **Schnarchstopper SL 70** wirkt sanft auf den Schlafenden ein. Erkennt er ein Schnarchgeräusch mittels Tonerfassung und über Körperschall, so sendet er Ton- und Vibrationsimpulse um das Schnarchen zu unterbrechen. Die Halsmuskulatur festigt sich und die Atemwege werden geöffnet. Die Atmung beruhigt sich und die Schnarchlaute nehmen ab. Zusätzlich kann es zu einer Veränderung der Liegeposition kommen. Endlich wieder ruhige und erholsame Nächte!



The innovative **Snore Stopper SL 70** acts gently on the sleeper. If it discovers a snoring noise by tone detection or structure-borne sound, it sends vibration and sound pulses to interrupt the snoring. The throat muscles become firm and the airways open. Breathing is calmed and the snoring decreases. It may also change your lying position. Have a peaceful night!

Homescreen für schnellen Überblick und zur Navigation
Homescreen for quick overview and navigation



Farbiger Schnarchindikator:
Colourful snoring indicator:

Schnarchgeräusche pro Stunde/Snoring sounds per hour	Farbe/Colour	Schnarchlevel/ Snore level
0-19/h	●	normal/normal
20-49/h	●	leicht/light
50-99/h	●	mittel/middle
≥100/h	●	schwer/heavy




Schnarchtagebuch:
Dokumentation von Einflussfaktoren wie z. B. Alkohol, Stress, etc.
Snore diary:
Documentation of influencing factors such as alcohol, stress, etc.




Grafische Übersicht:
Tag, Woche, Jahr
Graphical overview:
Day, week, year



Einstellungen:
Individualisierung von Ton- und Vibrationsalarm
Settings:
Individualisation of sound and vibration alarm

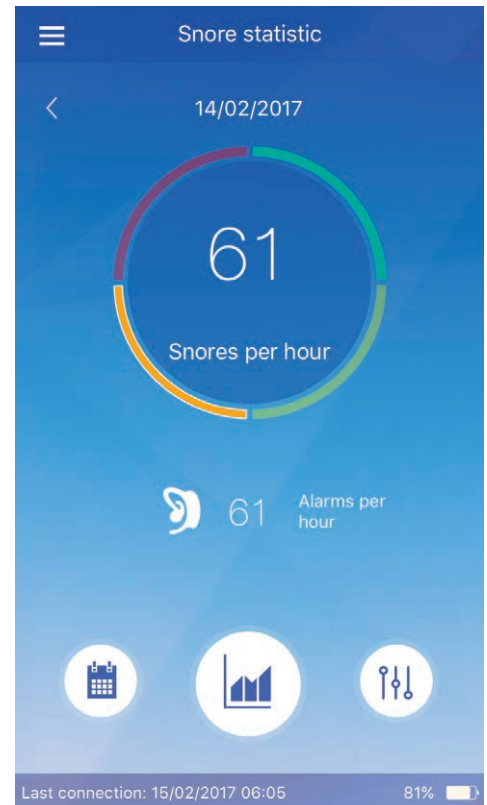

Beispielscreen "grafische Übersicht"
Screen example "graphical overview"

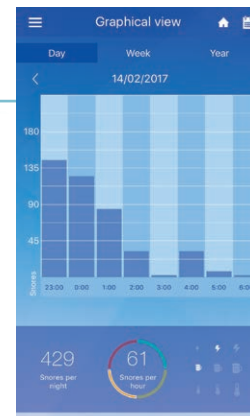

Übertragung per **Bluetooth®** low energy technology
Transfer using **Bluetooth®** low energy technology



Liste der unterstützten Smartphones
List of supported smartphones

Systemvoraussetzungen/
System requirements:
iOS ≥ 8.0
Android™ ≥ 4.4
Bluetooth® 4.0

*Die App zum Download kann sich von der abgebildeten Illustration unterscheiden.
*The app you download may differ from the illustrations.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.